

SUN TECH
MEDICAL

Cavitazione Ultrasonica




Cos'è la cavitazione

La Cavitazione nelle sostanze liquide e pastose è generata da ultrasuoni a bassa frequenza con la formazione di micro bolle che implodono nella massa adiposa provocando la rottura dei lipociti (lipoclasia) e la loro fluidificazione (lipolisi).

Schermata semplificata

25 protocolli memorizzati con 5 modalità per ogni zona selezionata tra polpacci, gambe, glutei, addome e braccia.

Il display visualizza automaticamente la frequenza di 28Khz o 38Khz ed il manipolo da usare sulla zona selezionata.

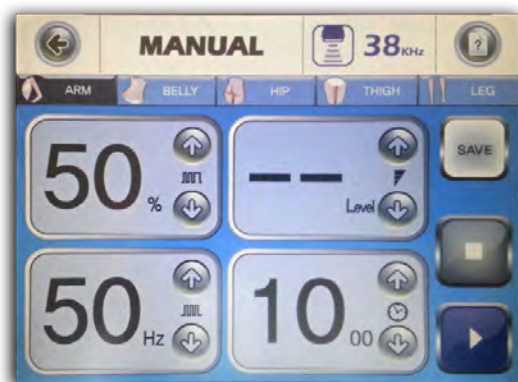

Schermata avanzata

Consente di selezionare l'area da trattare tra fianchi, gambe, glutei, addome, braccia e di seguito personalizzare i programmi, agendo su diversi parametri come ripetizione degli impulsi, durata degli impulsi e potenza.

Scheda tecnica

- **Modello:** LIPOCLASIS DUAL
- **Certificazione:** CE SGS 0120
- **Classe di sicurezza :** IIa
- **Potenza max:** 3Watt / cm²
- **Monitor:** Color touch screen
- **Manipolo A:** 7,5 cm - 28Khz
- **Manipolo B:** 6,5 cm - 38Khz
- **Dimensioni:** L 33 x P 36 x H 19 cm.

Sun tech medical srls

Tel. +39.06.5030790 Mob. +39.333.6202998 Mail: info@suntechmedical.it