

# Radiofrequenza, Vacuum e Led



## Radiofrequenza, Vacuum e Led

Una sinergia di sicuro successo per adipe localizzato, cellulite, rilassamenti cutanei e lifting viso.

Il calore indotto dalla Radiofrequenza e l'azione ritmata della Vacuum, aumentano la vascolarizzazione, effettuando una forte azione lipolitica e drenante su adiposità e cellulite e stimolando i fibroblasti ad una maggiore produzione di collagene per un naturale effetto Lifting.

I LED sui manipoli effettuano una azione lipolitica.



## Radiofrequenze


### Radiofrequenza resistiva:

quadripolare per il viso, esapolare per il corpo, con manipoli di diverso diametro e potenza, per l'esigenza di ogni zona.

### Vacuum continua & pulsata:

da leggera e superficiale ad energica e profonda, 5 diverse modalità di pulsazioni che agiscono come un rilassante massaggio ritmato.

I LED sui manipoli effettuano una azione lipolitica.

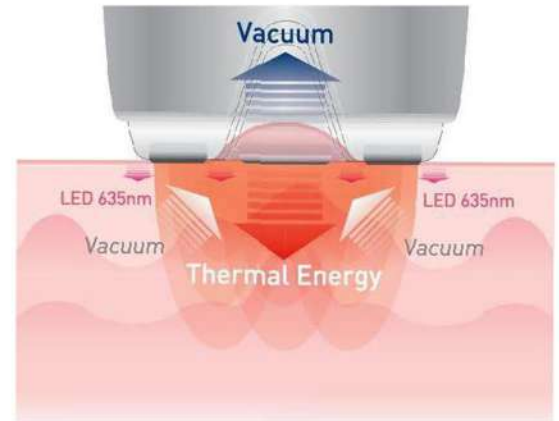

## Manipoli

Tre manipoli: 2cm/7Watt - 5cm/12Watt - 8cm/14watt, Uso rapido senza piastra di riferimento e gel a contatto.

Plug & Play, l'apparecchiatura riconosce e si adatta automaticamente al tipo di manipolo connesso. Gli elettrodi in acciaio di alta qualità garantiscono un calore uniforme e nessuno shock elettrico al Vs. paziente.



8 cm. - Corpo

5 cm. - Corpo

2 cm. - Viso

## Display

Il Display 7" LCD molto luminoso con comandi a sfioramento retroilluminati.

Grafica semplice ed intuitiva con tutte le funzioni facilmente identificabili.

Le impostazioni sono sempre variabili, senza la necessità di mettere in pausa l'apparecchiatura.



## Manutenzione e Pulizia

Il filtro, pratico ed efficace, blocca qualsiasi intasamento dovuto a creme, olii e parti organiche aspirate dalla vacuum.

Vano filtro ispezionabile, per una rapida sostituzione del filtro.

Filtro lavabile e riutilizzabile più volte.

Uno speciale scovolino in dotazione, facilita la pulizia in tutti i canali di aspirazione vacuum all'interno dei manipoli.



## Scheda Tecnica

Apparecchiatura per uso estetico professionale, conforme al Dlg 206/15, legge 1/90.

<b>Alimentazione</b>	AC220V
<b>Radiofrequenza</b>	Quadripolare - Esapolare
<b>Potenza RF</b>	Large: Max 14Watt Medium: Max 12Watt Small: Max 7Watt
<b>Frequenza RF</b>	1MHz
<b>Vacuum</b>	Max 250mmHg
<b>Monitor/Display</b>	LCD + touch retroilluminato
<b>Dimensioni</b>	297mm x 285mm x 260mm
<b>Peso</b>	6kg

## Sun tech medical srls

Tel. +39.06.5030790

Mob. +39.333.6202998

[suntechmedical.srl@gmail.com](mailto:suntechmedical.srl@gmail.com)

[info@suntechmedical.it](mailto:info@suntechmedical.it)