

# Onde d'urto



## Onde d'urto

Cosa sono le Onde d'urto: L'onda d'urto radiale e' un impulso pressorio generato da un manipolo chiuso all'estremità da un applicatore d'acciaio, contro il quale viene lanciato un proiettile con una pressione da 1 a 5 bar con frequenze da 1 a 22Hz/sec.

L'energia rilasciata ai tessuti dalle Onde d'urto, incrementa la vascolarizzazione e attiva i naturali processi riparativi.

Più di 25 protocolli, scheda pazienti e VAS, in memoria.

Applicazioni veloci ed indolore da 3 a 5 minuti per zona.



## Accessori e versatilità

L'apparecchiatura, accessoriata per effettuare ogni tipo di trattamento, include 4 applicatori di diversa grandezza, con diametro da 6mm, 15mm, 25mm, 35mm.

Speciali protezioni in silicone per l'igiene e la sicurezza.

Vita del manipolo 4.000.000 di colpi per 1600 trattamenti.




## Pratica e trasportabile

L'apparecchiatura e tutti gli accessori sono facilmente trasportabili in una pratica valigetta per spostamenti dallo studio ed effettuare trattamenti domiciliari.



## Applicazione onde d'urto

Trattamenti consigliati: Estetica corpo, Fisioterapia, Riabilitazione, Andrologia, Urologia, Veterinaria.

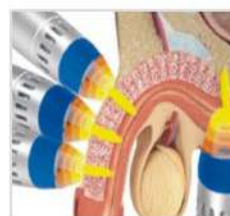

## Scheda Tecnica

Dispositivo certificato 93/42 EEC registrato nel data base dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute

<b>Alimentazione</b>	240V, 50/60Hz
<b>Certificazione</b>	CE 0120
<b>Classe di sicurezza</b>	Ila
<b>Tecnologia</b>	Radiale Elettromagnetica
<b>Potenza/Energia</b>	1-5 Bar = 60-185mj
<b>Frequenza</b>	1-22Hz
<b>Display</b>	Touch screen 7"
<b>Applicatori</b>	6mm, 15mm, 25mm, 35mm.
<b>Durata manipolo</b>	4.000.000 di colpi
<b>Dimensioni</b>	290×240×130mm
<b>Peso</b>	3kg

## Sun tech medical srls

Tel. +39.06.5030790

Mob. +39.333.6202998

[suntechmedical.srl@gmail.com](mailto:suntechmedical.srl@gmail.com)

[info@suntechmedical.it](mailto:info@suntechmedical.it)