

Lipolaser



Lipolaser D2

Lipolaser di ultima generazione con lunghezze d'onda di 808nm ed infrarossi 940nm.

Il funzionamento del Lipolaser si basa sulla bio-stimolazione dei naturali canali metabolici.

Le due lunghezze d'onda utilizzate hanno una affinità selettiva verso gli adipociti ed avviano una reazione chimica nei trigliceridi che vengono scissi in acidi grassi e glicerolo per poi essere trasportati attraverso il sistema linfatico ed eliminati dalle normali funzioni fisiologiche in maniera completamente naturale.

Al termine di ogni trattamento il paziente potrà riprendere il normale corso delle attività giornaliere senza alcun disagio o controindicazione.



Applicatori Lipolaser D2

L'apparecchiatura aziona da 8 a 12 placche di grandi dimensioni con a scelta da 16 a 30 diodi laser per placca e 2 placche di piccole dimensioni per coprire contemporaneamente le zone di addome, gambe ed inguine.

Le placche hanno un pratico sistema di aggancio tra loro che ne facilita il posizionamento secondo la zona da trattare.




Risultati Lipolaser D2

Il lipolaser oltre all'azione sul grasso in eccesso è molto efficace anche contro la cellulite stimolando la microcircolazione con una significativa ossigenazione dei tessuti ed una maggiore elasticità della pelle.

L'azione del Lipolaser consente una perdita della circonferenza da 2cm a 4cm per seduta.

Il trattamento di 20-30 minuti andrà ripetuto 2 volte a settimana per almeno 4 settimane.

Un significativo aumento del risultato può essere ottenuto con l'uso di Radiofrequenza abbinata a Vacuum effettuato nella stessa seduta.

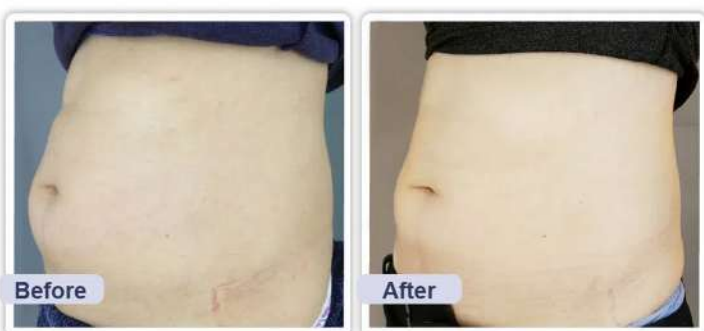

Scheda Tecnica

Apparecchiatura per uso estetico professionale, conforme al Dlg 206/15, legge 1/90

Alimentazione	230V - 50/60Hz
Assorbimento	500 VA
Fusibili	F250V-5A
Classe Laser	III-BF
Grado di Protezione	IPX0
Display	Color Touch Screen 8"
Lunghezze d'onda	808nm - 940nm
Potenza d'uscita diodo	Max 10mW
Misure Placca Grande	130x66mm
Numero diodi per placca	da 16 a 30 diodi
Misura placca piccola	66x45mm
Numero diodi per placca	2 diodi
Diomensioni	98x57x50cm
Peso	20kg

Sun tech medical srls

Tel. +39.06.5030790

Mob. +39.333.6202998

suntechmedical.srl@gmail.com

info@suntechmedical.it