

Laser Fibra 1470+980nm


LIFTING - LIPOSUZIONE - ODONOTIATRIA - FISIOTERAPIA



Laser multifunzione per tante soluzioni

Il Laser a fibra ottica 1470 + 980nm, da usare singolarmente o contemporaneamente, è il più indicato per interventi di Lifting viso non chirurgico e Biotstimolazione, Liposuzione e tightening su addome, glutei, gambe e braccia, Teleangectasie degli arti inferiori, Fisioterapia e Odontoiatria per Parodontologia, Endodonzia, Chirurgia del cavo orale e Procedure estetiche.

La versatilità della doppia lunghezza d'onda, la potenza fino a 15Watt, il controllo in millisecondi del tempo d'impulso (T-on) e della pausa d'impulso (T-off), le funzioni in modalità singola, continua e ripetuta e l'ampia varietà degli accessori, rende questo Laser uno dei più completi in commercio.

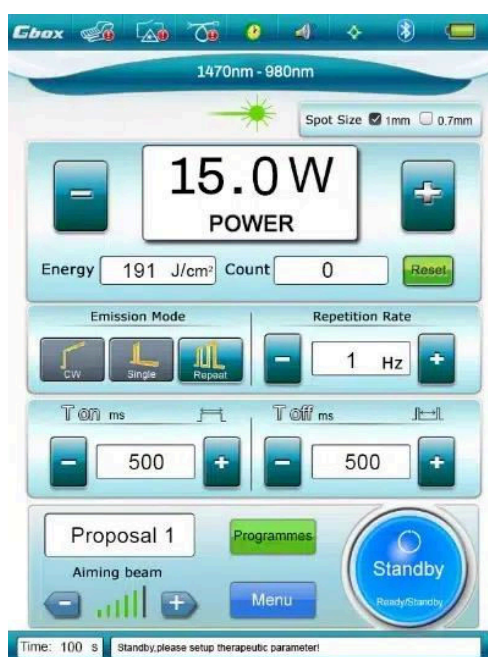

Tutti i parametri in un Touch

Un intuitivo Touch Screen visualizza tutti i parametri facilmente variabili: Potenza in Watt, Energia in Joule/cm², Durata (T-On) e Pausa (T-Off) dell'impulso in millisecondi (da 1 ms a 10sec.), Larghezza dello spot laser (0,7mm-1mm-2mm-3mm), Tempo del trattamento, Luminosità del raggio guida, Emissione Laser (Continua, Singola e Ripetuta) con possibilità di salvare in memoria fino a 16 protocolli.

Manipoli e accessori

Sei manipoli, completamente accessoriati, offrono numerose soluzioni per i seguenti trattamenti:

- Manipolo per Lifting Viso non chirurgico con cannule specifiche o fibra ottica nuda e Liposuzione con cannule specifiche, collegabile ad apparecchiature per suzione tramite Vacuum.
- Manipolo focalizzato per Teleangectasie degli arti inferiori con spot da 0,7mm-1mm-2mm-3mm.
- Manipolo frazionato per Ringiovanimento e Biostimolazione.
- Manipolo per Fisioterapia.
- Manipolo e cannule per Otorinolaringoiatria (ENT).
- Manipolo per Odontoiatria (Parodontologia, Endodonzia, Chirurgia del cavo orale e Procedure estetiche) con un set di accessori completi, contenuti in una pratica valigetta.



Cannule Liposuzione Lifting



Cannule Liposuzione Lifting



Cannule Liposuzione Lifting



Manipoli per Odontoiatria



Vascolare Gambe



Manipoli Fisioterapia

Scheda Tecnica

Dispositivo certificato 93/42 EEC registrato nel data base dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute

Laser Tipo	GaAlAs diode laser
Lunghezza d'onda	980nm ($\pm 10\%$), 1470nm ($\pm 10\%$)
Potenza in uscita	1470nm: 1W-15W, 980nm: 1W-15W
Durata impulso	25 μ s - 10 sec
Modalità operative	Continua, Singola, Ripetuta
Raggio guida	Diodo laser 635nm, potenza < 5mW
Display interfacce	LCD Color Touch screen
Alimentazione	100-240VAC, 50-60Hz, 200VA
Classe Laser	Classe IV
Classificazione sicurezza	Classe I Tipo B
Manipolo Liposuzione e Lifting Viso	Completo di 5 cannule + 2 Fibre ottiche
Manipoli Optional	Vascolare focalizzato, Odontoiatria, Fisioterapia
Fibre ottiche compatibili	200 μ m, 300 μ m, 400 μ m, 600 μ m con connettore SMA905
Dimensioni	256(W) \times 223(L) \times 312(H) mm
Peso	4 kg
Certificazione	MDD CE 0197 (TUV)

Sun tech medical srls

Tel. +39.06.5030790
Mob. +39.333.6202998
suntechmedical.srl@gmail.com
info@suntechmedical.it